

SKG F3 Mini

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

## BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy a SKG terméket választotta!

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

## BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- Ne használja a készüléket a következő egészségügyi készülékekkel együtt:
  - Beültetett szívritmus-szabályzó vagy egyéb beültethető egészségügyi elektronikai eszköz.
  - Mesterséges szív vagy tüdő vagy egyéb élet-fenntartó egészségügyi elektronikai eszköz.
  - EKG és egyéb egészségügyi elektronikai eszköz.
  - Benzinkutak, magas portartalmú üzemek, gáz és egyéb gyúlékony, robbanásveszélyes területen.
- Ha a felhasználó magas frekvenciájú sebészeti eszközt és a készüléket egyszerre használja a testén, az elektródák égési és egyéb károkat okozhatnak a készülékben.
- Ha a készüléket rövidhullámú mikrohullámú terápiás eszköz közelében (1m) használja, a termék kimenete instabil lehet.
- A kezelés alatt kerülje, a készülék sebekkel és sérülésekkel történő érintkezését.
- A készülék használata során figyeljen rá, hogy a mellkason ne helyezze a szív közelébe.
- A készülék használata csak egy személy részére javasolt. Ha több személy használja, tisztítsa meg a fejeket új személy általi használat előtt.
- Ha a használat során vagy után kellemetlenül érzi magát, hagyja abba a termék használatát és forduljon egészségügyi szakemberhez.
- Az alábbi esetekben forduljon orvosához a termék használatba vétele előtt, különben balesetet vagy fizikai kényelmetlenséget okozhat:
  - Egészségügyi kezelés alatt álló és kényelmetlen érzéssel rendelkező beteg
  - Rendellenes szív és idegrendszerrel rendelkező beteg
  - 38 fokos testhőmérséklet felett (láz esetén)
  - Fertőző betegség esetén
  - Bőrérzékenység vagy egyéb bőr rendellenesség esetén
  - Gyógyszeres kezelés alatt álló beteg
  - Rendellenes vérnyomás esetén
  - Korlátozott cselekvő képesség esetén
  - A magas perifériás keringési rendellenességek, például cukorbetegség miatt érzékszervi károsodásban szenvedő betegek.
- Az alábbi esetekben ne használja a készüléket:
  - Rosszindulatú daganat esetén
  - Kirschner drótos kezelést kapott betegek (soha ne használja semmilyen törött részen).
  - Csontritkulásban szenvedő betegek
  - Vénás trombózis vagy pulzáló betegség esetén
  - Magas vérnyomás esetén
  - Visszér probléma esetén
  - Vérékenység esetén
  - Állapotos nők, ágynyugalom esetén
  - Vesekővel rendelkezők esetén óvatosan használják a készüléket. Ne használja a vese közelében.
  - Akut gyulladással megbetegedés esetén
  - Szívritmus-szabályzóval rendelkező betegek esetén
  - Fém implantátummal rendelkezők esetén

- Szív közelében
- Térdkalács, sípcsont, lábközépcsont, stb helyeken
- Közvetlenül a gerincen, nyakcsigolyákon, arcizmokon
- 4-5 percnél hosszabban egy területen
- Bármilyen ellenjavallat esetén egyeztessen az orvosával!
- Ne használja a szív közelében, a nyak felett, fejen, szájon, genitáliákon, bőr rendellenességén, valamint a talpakon egyszerre. Továbbá nem nyomja a belső szerveket a használat során.
- Bőrsérülések elkerülése érdekében ne használja a készüléket közvetlenül a bőrfelületen. Helyezzen száraz, tiszta ruhát vagy törölközőt a használni kívánt területre és óvatosan mozgassa a készüléket.
- Ne használjon erős fokozatot a fejen vagy csont közelében. Csak lágy részeken használja, ha nincs fájdalom vagy kényelmetlen érzés.
- Gyakori magas fokozaton, erős nyomással történő használat hámlást okozhat. Fájdalom vagy kényelmetlen érzés esetén hagyja abba a készülék használatát.
- Ne használja együtt más egészségügyi termékkel vagy két terméknel többet egy időben.
- Ne használja sérült vagy repedezett felületen.
- A készülék megfelel az FCC szabályzat 15. pontjának. Nem okoz sérülést okozó interferenciát. Ennek a készüléknek el kell fogadnia a kapott interferenciát, beleértve azokat az interferenciákat, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.
- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- Kérjük, ne tegye ki a készüléket erős elektromágnesességnek, ill. rádióhullámoknak. Ezek a készülék meghibásodását okozhatják.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek (0°C alatt és 40°C felett), valamint tűző napsugárzásnak.
- Amennyiben a készülék elektromos hálózatra történő csatlakoztatása után azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a tűzesetek megelőzése érdekében!
- Tűz-, és balesetveszély elkerülése érdekében ellenőrizze használat előtt, hogy az akkumulátor és a töltő nem sérült-e. Ne használja a készüléket ha a töltő vagy az akkumulátor sérült.
- A készülék nem játék! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermekek elől elzárva tárolja, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
- A készüléket hűvös, száraz helyen tárolja.
- Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati kábelt.
- Védje a hálózati kábelt. Vezesse úgy, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.
- Húzza ki a kábelt a fali aljzatból, amennyiben huzamosabb ideig nem szándékozik használni a készüléket.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Ne használjon semmilyen illatosító anyagot a szűrőn. Az ilyen termékek gyúlékony vegyületeket tartalmazhatnak, amelyek miatt a készülék kigyulladhat.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülékben.
- Huzamosabb használat esetén, vagy folyamatos terhelés mellett a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre.
- Ne helyezzen tárgyakat a készülék nyílásaiba, ne használja a készüléket bármelyik nyílás eltömődése esetén. Tartsa por, szősz, haj és egyéb tárgyaktól távol, amelyek akadályozhatják a légáramlást.
- Ezt a terméket gyermekek, szellemileg-, vagy fizikailag korlátozott személy nem használhatja. A készülék karbantartását és tisztítását gyermekek nem végezhetik.
- Ne nyúljon a mozgó alkatrészekhez, és tartsa távol az ujját, haját és a ruházatát is tőlük.

- A tisztítás vagy karbantartás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket és távolítsa el a tápkábelt a konnektorból.
- Kizárólag a készülékhez kapott töltőkábelt használja. Más töltőkábel használata érvénytelenítheti a jótállást. A töltésre vonatkozó előírásokat szigorúan tartsa be!
- Ne vágja szét, ne javítsa és ne módosítsa a készüléket vagy a tartozékokat.
- Ne érintse meg a töltőt vagy a készülék bármely részét nedves kézzel.
- A készüléket mindig tartsa távol a hőforrásoktól (pl. radiátor, fűtőtest).
- Megfelelően kezelje az akkumulátort – veszélyes hulladéknak számít!
- Szállítás előtt ellenőrizze, hogy ki van-e kapcsolva a készülék. Javasoljuk az eredeti csomagolás megtartását.
- Amennyiben huzamosabb ideig nem használja a készüléket, javasoljuk, hogy legalább 90 naponként töltsen fel teljesen az akkumulátort.
- NE dobja az akkumulátort vagy a készüléket és tartozékokat tűzbe, mert robbanásveszélyes.
- NE merítse vagy dobja az akkumulátort vagy a készüléket és tartozékokat bármilyen vízbe, sós vízbe vagy folyadékba.

### Megjegyzések:

- Ha kényelmetlenséget vagy rendellenességet tapasztal a termék használata során, hagyja abba a termék használatát azonnal!
- Ha a testén vagy bőrén furcsa érzést tapasztal, konzultáljon orvosával és kövesse az orvos utasításait.
- Ha készüléket használat közben más személyre helyezi, ellenőrizze, hogy az áthelyezés előtt a készüléket kikapcsolta.
- Ne használja elektronikai eszközök viselése közben.
- Ha rendellenes működést tapasztal, kapcsolja ki a készüléket és vegye le.
- Ne csatlakoztassa vagy húzza kis az USB kábelt nedves kézzel.
- Ne használja magas páratartalmú helyiségben (pl. fürdőszoba) vagy fürdés közben.
- Ne használja alvás közben.
- Ne használja hosszú ideig egy területen (több, mint 5 percig).
- Masszázs közben ne érintkezzenek az elektródák övek, nyakláncok, stb. fém felületeivel.
- Viselje megfelelően a készüléket a nyaki gerincen.
- Az USB kábel eltávolításakor ne csak a kábelt húzza, hanem a csatlakozó végénél fogja meg a kábelt.
- Hosszabb idejű használat esetén a felület felmelegedhet. Ez normális jelenség.
- Ellenőrizze, hogy a gomb megfelelően működik.
- Első használat előtt, vagy hosszabb használaton kívüli időszak után, töltsen fel az akkumulátort.
- Ha nem használja tovább a terméket figyeljen oda a helyi hulladék-kezelési szabályok betartására.

### **Javaslatok használatra:**

- Pihenés erőnléti edzés után
- Rehabilitációs edzés
- Izomrostok ellazítása és a lágyrészek nyújthatóságának javítása
- Izomfájdalom és fáradtság
- Erőnléti edzés

# JELLEMZŐK

Modell:	F3-EN
Áramellátás:	Lithiom-ion akkumulátor, 2200 mAh
Névleges feszültség:	5V
Névleges teljesítmény:	10W
Töltési mód:	USB Type-C
Méret:	136,6x89,85x45,7mm
Súly:	495g

\* Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a környezet változása miatt a valóságban eltérhetnek.

## DOBOZ TARTALMA

- SKG F3 masszázspisztoly
- USB-C kábel
- Hordtok
- 4 db cserélhető masszázsfej
- Használati útmutató
- Jótállási jegy

## Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik. Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

## Gyártó:

SKG Health Technologies Co., Ltd.  
Address: 23A Floor, building 3, zhongke R&D Park, No. 009, Gaoxin South 1st Road, High-tech Zone Community, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen, China

## Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

A gyártó ezennel kijelenti, hogy a készülék megfelel minden direktívának és európai normának.

## Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.

© 2024 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.

## IMPORTŐR:

# WayteQ

WAYTEQ EUROPE KFT. | 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.

Tel.: (+36-1) 445-1222


Email: [info@wayteq.eu](mailto:info@wayteq.eu) | Web: [wayteq.eu](http://wayteq.eu) [mstore.hu](http://mstore.hu)

SKG F3 Mini Manual HU v1.0 - 5. oldal

A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.

A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.

## KEZELŐSZERVEK

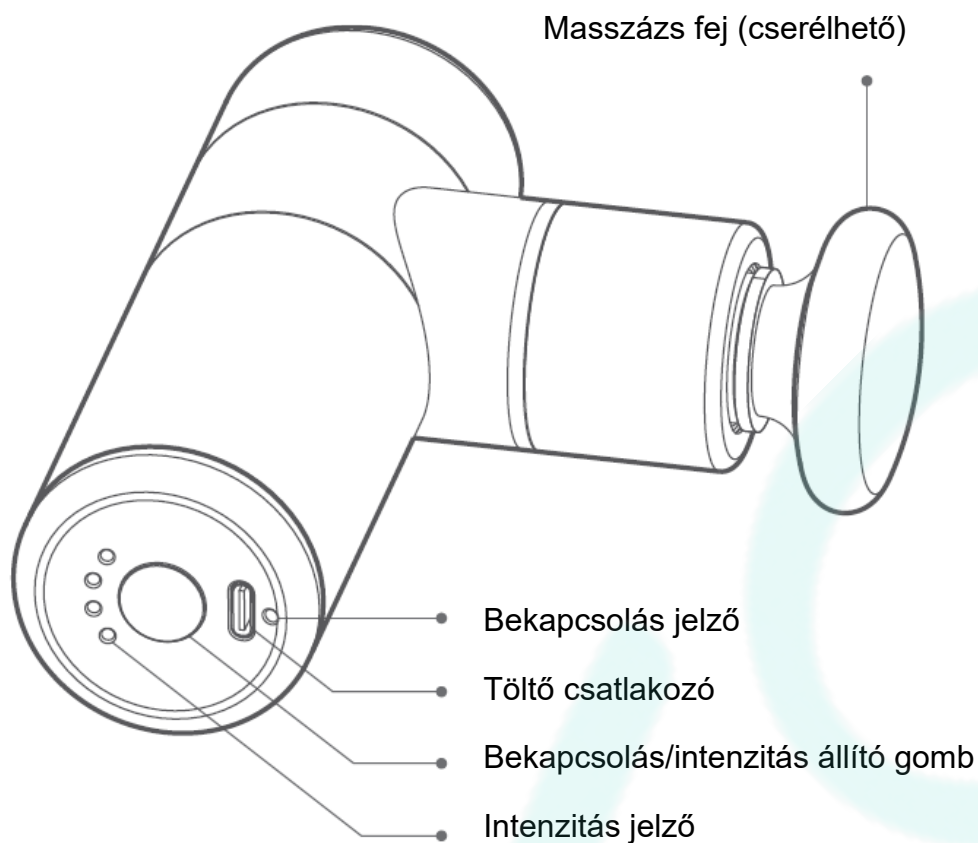

## TARTOZÉKOK




Mély szövetekre (pl meridiánok, ízületek és akupunktúrás pontok)

Lágy részek és érzékeny izomcsoportokhoz


# HASZNÁLAT

## Masszázsfej felhelyezése / cseréje

Válassza ki a megfelelő masszázsféjet és helyezze be a masszázspisztoly elején található kerek lyukba.

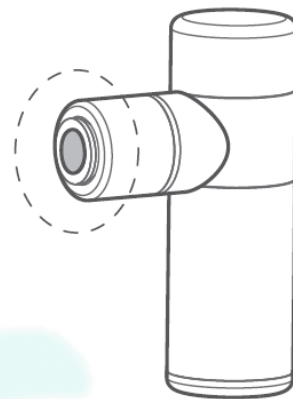

Felhelyezett fejek

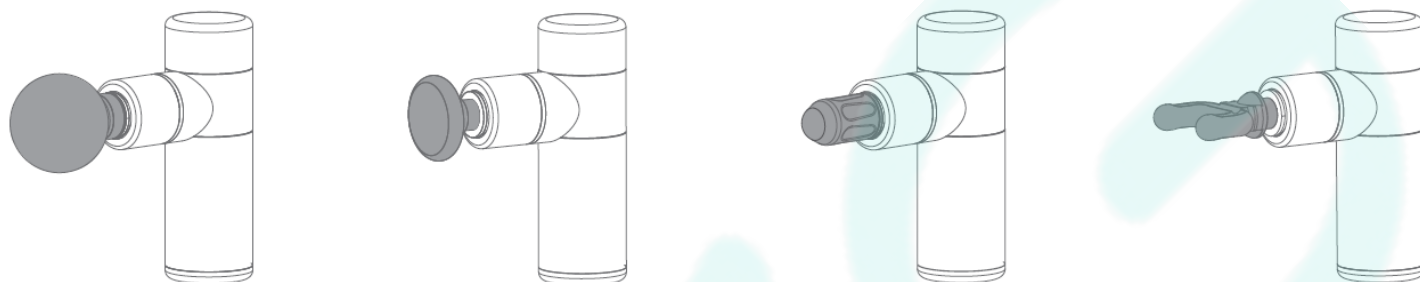


## Be/kikapcsolás

Nyomja meg hosszan a bekapcsoló/intenzitás váltó gombot a készülék be-, vagy kikapcsolásához.

### Megjegyzés:

*Javasolt, hogy a bekapcsolást követő 5 másodpercen belül kezdje meg a használatot. Ne használja töltés közben!*

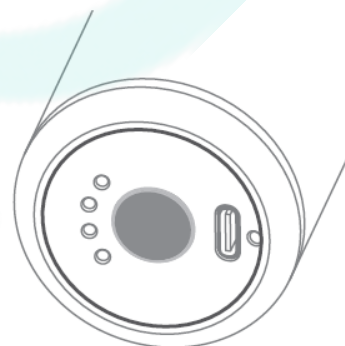

## Intenzitás váltás


Bekapcsolás után nyomja meg a bekapcsoló/intenzitás váltó gombot az intenzitás váltásához. Az intenzitás 4 fokozatban állítható. Az utolsó fokozat után megnyomva újra az első fokozat lesz használatban.

## Jelzőfények

Bekapcsolás jelzés			Intenzitás jelzés		
Jelzés	Állapot	Leírás	Jelzés	Állapot	Leírás
Vörös	— folyamatosan világít	Töltés kikapcsolás után	Kék	●○○○	1-es intenzitás
Zöld	— folyamatosan világít	Töltés befejeződött	Kék	●●○○	1-es intenzitás
Zöld	- - - lassan villog	Töltési szint ≤ 10%	Kék	●●●○	1-es intenzitás
Zöld	- - - folyamatosan villog	Töltési szint: 11-30%	Kék	●●●●	1-es intenzitás
Zöld	..... gyorsan villog	Töltési szint: 31-60%	Kék	●○○○	Kikapcsol, alacsony energiaszint miatt
Zöld	— folyamatosan világít	Töltési szint: 61-100%			

## TÖLTÉS

Alacsony energiaszint jelzésekor töltsse fel az akkumulátort. Csatlakoztassa a mellékelt töltő kábel USB-C csatlakozóját a készülékhez, a másik végét a töltő adapterhez (nem tartozék). A töltés jelző vörösén világít töltés közben, a töltés végén zöldre vált.

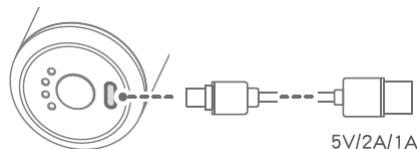

**Megjegyzés:** Ne használja töltés közben a készüléket!

## TÁROLÁS ÉS KARBANTARTÁS

Tárolja gyermekek és háziállatok számára nem elérhető helyen.

Ne helyezze magas hőforrás közelébe (pl. sütő, fűtőtest) vagy gépjárműben meleg napon.

Tárolja száraz helyen.

Az akkumulátor károsodásának elkerülése érdekében ne töltsse túl, illetve ne hagyja alámerülni az akkumulátort.

Ne használja túl meleg vagy túl hideg környezetben.

## HULLADÉK-KEZELÉS

### Újhasznosítási tájékoztató

Környezetvédelmi okokból a termék vagy részeinek hulladék-kezelésekor felelős fogyasztóként gondoskodnia kell róla, hogy elkülönülten gyűjtse a háztartási hulladéktól és el kell juttatnia megfelelő hulladék-hasznosító szervezethez, ahol a terméket vagy részeit szétszerelik és a helyi szabályoknak megfelelően kezelik.

### Veszélyes anyagok és összetevők

Rész neve	Veszélyes anyag									
	Pb	Hg	Cd	Cr (VI)	PBB	PBDE	DEHP	BBP	DBP	DIBP
Fém	x	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Panel	x	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Műanyagok	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Akkumulátor	x	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Tartozékok	x	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Motor	x	o	o	o	o	o	o	o	o	o

o: Azt jelzi, hogy a veszélyes anyag tartalom aránya nem haladja meg a RoHS 2011/65/EU irányelvben leírtakat.

x: Azt jelzi, hogy a veszélyes anyag tartalom aránya megfelel a RoHS 2011/65/EU irányelvben leírtak szerinti tartalmi jegyek alóli mentességnek.





Zöld élet

A termék 10 évnyi „zöld élet” élettartammal rendelkezik a gyártó tervei alapján. A „zöld élet” kifejezés csak normál használat esetén, a használati utasításban foglaltak betartásával értelmezhető.



## Akkumulátor

Támogassa az akkumulátor újrahasznosítását (lithium-ion akkumulátor)

 <p>Veszély</p>	<p>A készülék újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ne használja más termékben! Ne töltsse fel a kiszertelt akkumulátort!</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ne dobja tűzbe vagy melegítse fel!</li><li>• Ne szúrja meg tűvel, üsse meg vagy próbálja meg szétszerelni!</li><li>• Ne okozzon rövidzárlatot fém érintkezéssel!</li><li>• Ne tárolja nyaklánc vagy hajtű mellett.</li><li>• Ne töltsse, használja vagy helyezze tűz közelébe, ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy egyéb magas hőmérsékletnek.</li></ul> <p>A fentiek melegegedést, tüzet vagy robbanást okozhatnak</p>
 <p>Figyelmeztetés</p>	<p>A kiszertelt akkumulátort gyermekek által nehezen elérhető helyen tárolja.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Véletlen lenyelés esetén forduljon azonnal orvoshoz!</li><li>• Az akkumulátorból szivárgó folyadékot ne érintse meg és az alábbiak szerint kezelje:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Ha az akkumulátorból szivárgó folyadék szembe kerül, az vakságot okozhat. Ne érintse meg a szemét közvetlenül a kezével. Mossa meg a szemét vízzel és azonnal forduljon orvoshoz. Ha a folyadék bőrrel vagy ruhával érintkezik, irritációt és sérülést okozhat. Mossa meg vízzel és ha a kellemetlen érzés megmarad, azonnal forduljon orvoshoz.</li><li>○ Csak selejtezés esetén bontsa meg az akkumulátort, melyet csak szakember végezhet! Ellenkező esetben sérülést, áramütést és tüzet okozhat. Javítási igény esetén forduljon szakszervizhez.</li></ul></li></ul>

A készülékben használt lithium-ion akkumulátorok újrahasznosíthatóak és értékes erőforrások. Ha az akkumulátor elhasználódott adja át megfelelő szakértelemmel rendelkező szervezetnek újrahasznosításra.

- Az akkumulátort el kell távolítani a készülék hulladék-kezelése esetén.
- A készüléket áramtalanítani kell az akkumulátor eltávolítása előtt.
- Az akkumulátor eltávolításakor figyeljen a biztonsági előírásokra.