

# Oclean F1 Electric Toothbrush

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

## BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy Oclean terméket választott!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

## BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

### FIGYELMEZTETÉS

- Első használatoknál viszketést érezhet, vagy enyhe vérzést tapasztalhat, ez normális jelenség. Ez azért van így, mert az íny nincs felkészülve erre a hatékony tisztítást
- Ez a tünet általában 1-2 héten belül elmúlik. Amennyiben a tünetek nem múlnak el, fejezze be a fogkefe használatát és konzultáljon fogorvosával.
- Azok a felhasználók, akik fogászati kezelés, szájsebészeti eljárás alatt állnak, vagy implantátumot viselnek, csak fogorvos felügyelete alatt használják a fogkefét.
- Az Oclean F1 termék minden biztonsági előírásnak megfelel az elektromágneses készülékekkel kapcsolatban. A pészmekekkel és implantátumokkal kapcsolatban konzultáljon orvosával a termék használata előtt.
- Ez a termék csak a fogak, az íny és a nyelv tisztítására használható. Ne használja ettől eltérő célokra. Amennyiben kellemetlenséget, vagy fájdalmat érez, fejezze be a termék használatát és konzultáljon orvosával.

### BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- Ne merítse a töltő dokkolót vízbe vagy más folyadékba.
- Tisztítás után ellenőrizze, hogy a töltőaljzat csatlakozója teljesen száraz-e, és ezután dugja be a tápegységbe (nem tartozék).
- Ez a termék beépített újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ne dobja a terméket tűzbe.
- A készülék csak beltéri használatra alkalmas, az optimális hőmérséklet kb. 25°C
- A készülék csak otthoni használatra alkalmas.
- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző napsugárzásnak vagy közvetlen, nagy hőhatásnak.
- Amennyiben a készülék töltése közben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a tűzesetek megelőzése érdekében!
- Amennyiben a töltő dokkoló sérült, ne használja tovább a terméket.
- Amennyiben a fogkefe megsérült, ne használja tovább a terméket.
- Ne használja a fogkefét tusolás vagy fürdés közben.
- Ne hagyja a készüléket kisgyermek számára elérhető helyen
- A készülék nem játék! Gyermek minden esetben kizárólag szülői felügyelet mellett használhatja! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
- A készülék használatát 12 éves kor felett javasoljuk.
- Javasoljuk, hogy azon személyek, akik fizikailag, érzékszervileg, vagy mentálisan korlátozottak, csak felügyelet alatt, vagy akkor használják a készüléket, ha a termék használatának módját és az esetleges veszélyeket, kockázatokat teljesen megismerték és megértették, és részesültek a megfelelő oktatásban.

- A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.
- A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét.
- Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert.
- Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.
- Csak a készülékkel kompatibilis hálózati adaptert használja. Más adapter használata érvényteleníti a garanciát. Húzza ki az adaptert a fali aljzatból, amikor nem használja azt.
- Ellenőrizze a terméken lévő töltési paramétereket (V) és ennek megfelelő hálózati tápegységet használjon.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (0°C alatt és +40°C felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort.
- Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék alaplapjában.
- Huzamosabb használat esetén a fogkefe felmelegedhet. Ez normális jelenség.

### A fogkefe tisztítása

- Az ujjlenyomatok és egyéb szennyeződés eltávolításához használjon puha, sima felületű ruhát, mint pl. kamera lencsetisztító kendő.
- Ne használjon kemikáliákat, vagy maró anyagokat tartalmazó tisztítószeret, mert károsíthatják a burkolatát.
- A készülék külső felületét nedves ruhával tisztíthatja meg.

### Használati tippek

- Ne ossza meg másokkal a fogkefe használatát.
- Ne tekerje a kábelt a töltő dokkoló köré, mikor az tápegységhez van csatlakoztatva.
- Ne helyezzen fém tárgyat a töltő dokkolóra töltés közben, miközben az tápegységhez van csatlakoztatva.

## JELLEMZŐK

Modell:	Oclean F1
Nyomaték:	Max 220 gf.cm
Frekvencia:	36000 rpm
Névleges teljesítmény:	1.8W
Töltési idő:	Kb. 2 óra
Üzemidő:	Kb. 30 nap (naponta 2 alkalommal, alkalmanként 2 perc használattal)
IP vízállósági osztály:	IPX7
Töltés:	USB
Töltő dokkoló bemenet:	5V=0.6A
Áram ellátás:	800 MHz Lithium akkumulátor
Súly:	98g
Méret:	243,5 * 24,4mm

\* Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a környezet változása miatt a valóságban eltérhetnek.

## A DOBOZ TARTALMA

- Fogkefe
- 1 kefefej
- Töltő bölcső
- USB kábel
- Felhasználói kézikönyv
- Jótállási jegy

### Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

### Gyártó:

Shenzhen Yunding Information Technology Co., Ltd.

Address: #32G, Building 3, Dachong, Business Center (west of Tonggu Road and north of Shennan Avenue) Yuehai Subdistrict, Nanshan District, Schenzen

### Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

### Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.


© 2023 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.



IMPORTŐR:

**WayteQ**

WAYTEQ EUROPE KFT. | 1097 Budapest, Gubacsi út 6.  
Tel.: (+36-1) 21-73-632, (+36 1) 21-73-631 | Fax: (+36-1) 21-73-619  
Email: [info@wayteq.eu](mailto:info@wayteq.eu) | Web: [www.wayteq.eu](http://www.wayteq.eu) [www.mstore.hu](http://www.mstore.hu)

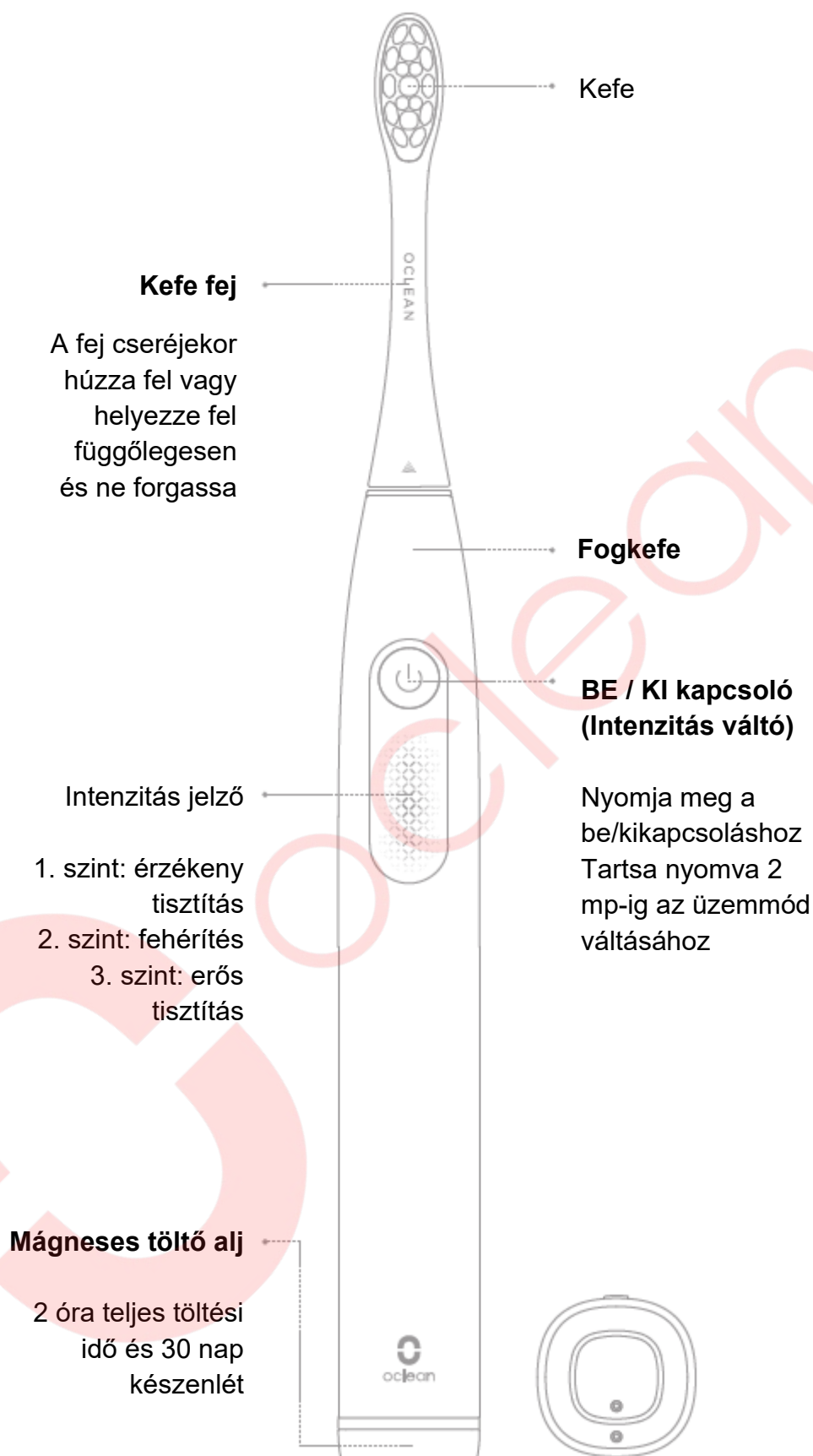

*A töltési szinteken a jelzőfény különböző állapota jelzi.  
Alacsony energiaszint esetén a jelzőfény vörösen világít.  
Az állandó teljes világítás teljes feltöltődést jelez.*

# A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

## Első használat

A bekapcsoláshoz nyomja meg a Be/kikapcsoló gombot. Az intenzitás fokozatosan növekszik a megfelelő erősséghez. Ez a fogkrém, víz fröccsenésének elkerülése érdekében történik.

## Befejezés figyelmeztető jelzés

A használat befejezésekor egy figyelmeztető jelzés hallható.

## Automatikus leállítás


A fogkefe bekapcsolás után 2 percig üzemel és után automatikusan kikapcsol.

## Tisztítási terület változtatása


Működés közben 30 másodpercenként vibrálás emlékezteti a felhasználót, hogy változtassa meg a tisztítási területet.

## Intenzitás változtatása használat közben


Nyomja meg 2 másodpercig a gombot az intenzitás váltásához. A jelzőfények száma mutatja a magas, közepes vagy alacsony intenzitást.

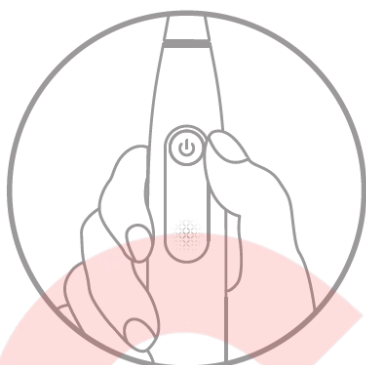

1. szint  
Érzékeny tisztítás

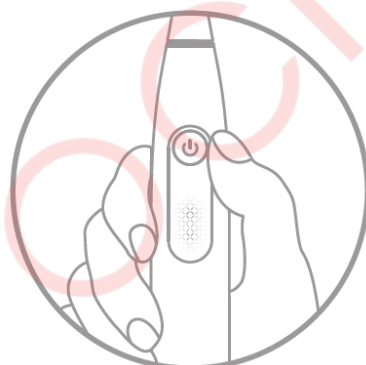

2. szint  
Fehéritési

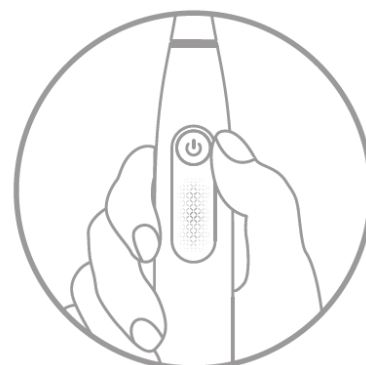


3. szint  
Erős tisztítás

## Alacsony energiaszint

A jelzőfény villogni fog, ha az energiaszint 20% vagy alacsonyabb, a normál használathoz töltésre van szükség.

Alacsony energiaszint figyelmeztetés: a fogkefe nem fog működni, ha az energiaszint 5% vagy alacsonyabb. Nyomja meg a bekapcsoló gombot. Vörös jelzés villan 2 alkalommal és a motor vibrál 2 alkalommal, ami a különösen alacsony energiaszintet jelzi. Töltés szükséges a használathoz ebben az esetben.

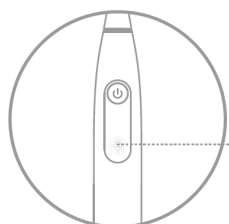

Jelzőfény villog

## Töltési szint

Töltés közben a jelzőfény lassú villogással jelez. A töltési szint a jelzőfény magassága alapján látható.

A jelzőfény vörösen villog ha az energiaszint alacsony. A jelzőfény folyamatosan fehéren világít, ha az akkumulátor teljesen fel van töltve.

## TÖLTÉS

Helyezze a fogkefét a töltő aljzatra. A jelzőfény jelezni fogja a töltés állapotát. A teljes töltési idő kb 2 óra. Javasolt töltő adapter (nem mellékelte, 5V/1A, 5V/2A).

### Javaslatok a töltéshez

A fogkefe gyorsöltési funkcióval rendelkezik. Javasolt, hogy csak akkor helyezze a töltő aljzatra, ha feltétlenül szükséges. Ne helyezze a fogkefét hosszú ideig töltőre, mert az idő előtt tönkre teheti az akkumulátort és így a felhasználói élmény csökken.

#### Megjegyzés:

*Ne szedje szét, üsse meg, nyomja össze vagy dobja tűzbe!*

*Fejezze be a fogkefe használatát, ha az akkumulátor felduzzadt!*


*Ne helyezze az akkumulátort magas hőmérsékletű környezetbe!*

*Ne használja, ha víz került a termék belsejébe!*

# JAVASOLT TISZTÍTÁSI MÓDOK

## Tisztítási idő


Fogorvosok javaslata szerint a fogmosási idő 2-3 percig kell tartson

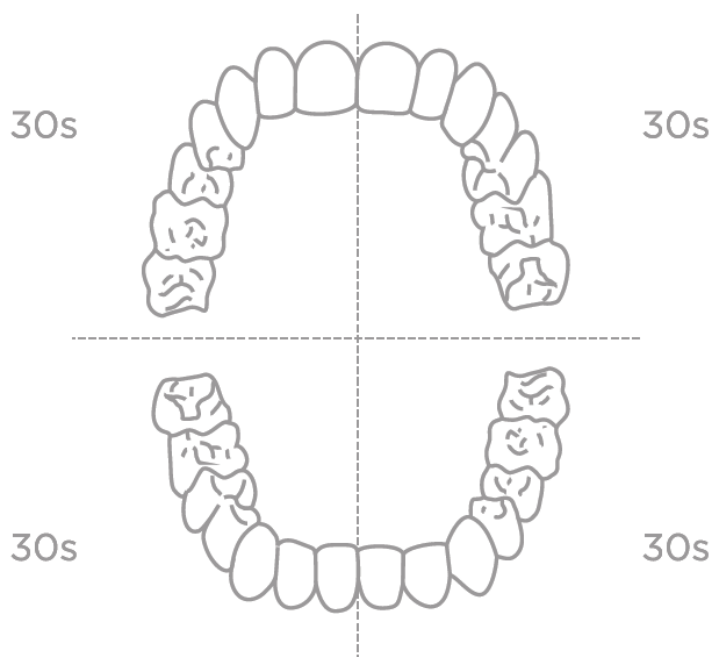

Külső 10 mp


Felső 10 mp

Belső 10 mp

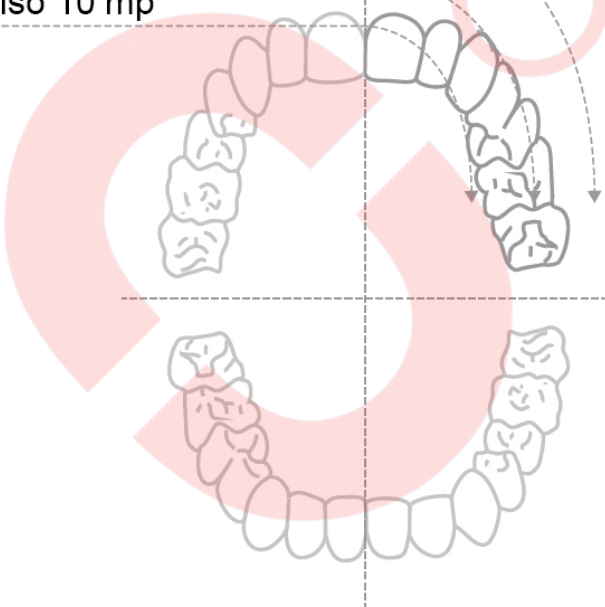



## JAVASOLT POZÍCIÓK A KÜLÖNBÖZŐ TERÜLETEKRE

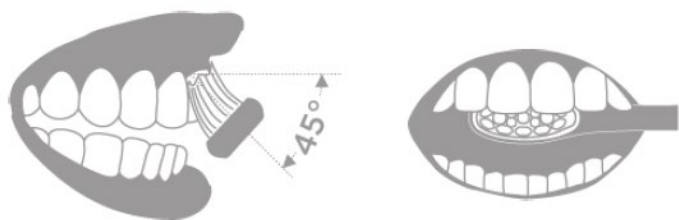

1

2



3



4




5




6

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

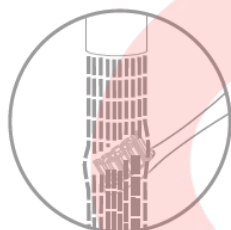


### Kefefej tisztítása

Tisztítsa meg minden használat után és hagyja megszáradni.

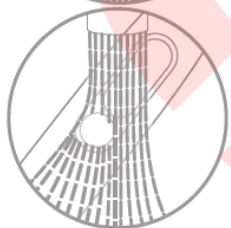


### A nyél tisztítása

Tisztítsa meg egy puha ruhával.

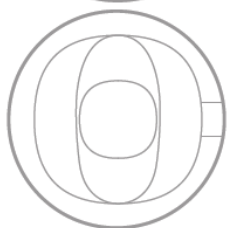


### A töltő tisztítása

Tisztítsa meg a koszos részeket egy puha ruhával. Tisztítás előtt húzza ki a fali aljzatból és csak teljes száradás után csatlakoztassa újra.

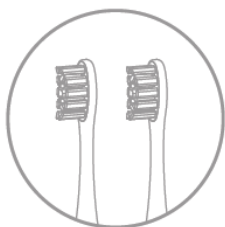

A fej cseréje  
A fej cseréje 2-3 havonta javasolt

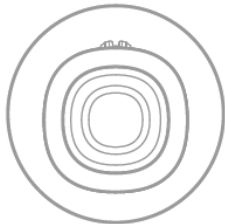


A nyél aljának tisztítása  
Mindig tartsa tisztán és szárazon a nyél alját, mielőtt azt a töltőre helyezi.  
Tisztítsa meg a koszos részeket egy puha ruhával.


## HASZNÁLATI LÉPÉSEK




Helyezze fel a kefe fejet a fogkefe nyelére. Egy kis hely marad a nyél és a kefefej között, így a fogkefe megfelelően tud működni.

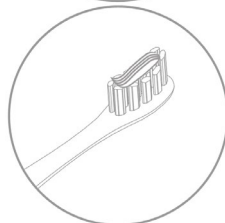


Hogy megelőzze a fogkrém szétfröccsenését csak kis mennyiséget tegyen a fogkefe fejre. Egy szónikus fogkefe több fogkrémet spórol meg, mint egy hagyományos.

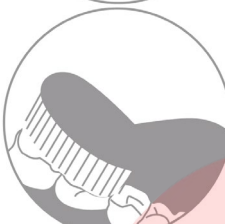


Nedvesítse be a fogkefe fejet és tegye a szájába, majd kapcsolja be a fogkefét a használat indításához.

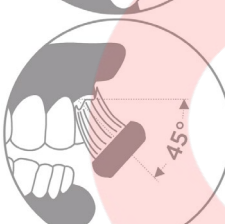

Óvatosan mozgassa a sörtéket az íny vonalához képest 45°-os szögben a megfelelő fogmosáshoz

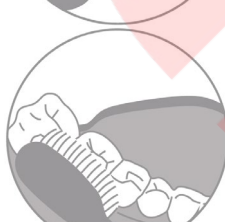

Fogja meg a nyelet és lassan mozgassa körkörös irányban. Ne nyomja keményen.

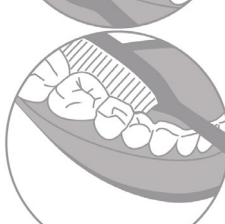

Öblítse el tiszta vízzel használat után.