

XIAOMI Masszázsasztály 2 Felhasználói Kézikönyv



Olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet használat előtt, és őrizze meg későbbi felhasználásra.

Biztonsági óvintézkedések

⚠ FIGYELMEZTETÉSEK

Használati korlátozások

- Ne használja a masszázspisztolyt a fejen, arcon, könyökön, térden és egyéb ízületeken, a gerincen vagy más csontos területeken, ahol kevés izomszövet található.
- Ne használja a masszázspisztolyt a nyak oldalán, elülső vagy hátsó részén (nyaki csigolyák), hogy elkerülje a carotis sinus károsodását. Ennek figyelmen kívül hagyása ájulást és szívéleállást okozhat.
- Ne használja a masszázspisztolyt a hónaljban, a felkar belső oldalán, a kulcscsont belső részén, a könyökhajlatban, a térdhajlatban, a hason, a vese területén, a nemi szerveken vagy más érzékeny területeken, ahol sűrű ideg- és érhálózat található.
- Ne használja a masszázspisztolyt olyan személyek alsó hasi területén, akik húgyúti betegségekben, például vesekőben, húgyvezeték-kőben, húgyhólyagkőben, húgycsőköben vagy húgyúti fertőzésben szenvednek.
- Ne használja a masszázspisztolyt olyan testrészekben, ahol zúzódás, fájdalom, felszíni seb, helyi láz, vörös duzzanat, gyulladás, izomgörcs, izomszakadás, akut rándulás, ütés vagy húzódás található.
- Ne használja a masszázspisztolyt, ha megerőltető edzés után olyan tüneteket észlel, mint láz, hányinger, hányás, izomfájdalom vagy gyengeség. Ilyen esetben azonnal forduljon orvoshoz.
- Ne használja a masszázspisztolyt olyan személyeken, akik az alábbi betegségekben szenvednek: szív- és érrendszeri vagy agyi érrendszeri betegségek, vérbetegségek, véralvadási rendellenességek, thrombocytopeniás purpura, nyaki plakk, visszér, vénás trombózis, rák, daganatok vagy mentális betegségek.
- Ne használja a masszázspisztolyt törött csonttal rendelkező vagy fém implantátummal élő személyeken.
- Ne használja a masszázspisztolyt vezetés vagy precíziós műveletek végzése közben.
- Ne használja a masszázspisztolyt hosszú ideig folyamatosan, mert a túlzott masszírozás izomkárosodást okozhat.
- Ha nem profi sportoló vagy edző, alacsony fokozaton kezdje a használatot, és fokozatosan növelje az intenzitást, ahogy a teste alkalmazkodik.

⚠ VIGYÁZAT

Óvintézkedések

- A masszázspisztoly előzetesen feltöltésre került a szállítás előtt. Javasolt a teljes feltöltése a kicsomagolás után, mielőtt használatba venné.
- Ne helyezze ujjait, haját vagy a test más részeit a masszázsfej és a masszázspisztoly nyílása közötti csatlakozás közelébe működés közben, hogy elkerülje a becsípődést.

- Ne zárja el és ne helyezzen idegen tárgyakat a masszázsfej horonyba vagy a töltőportba.
- Ne merítse a masszázspisztolyt vízbe vagy más folyadékba.
- Ne használja a masszázspisztolyt párás környezetben.
- Töltse és használja 5°C és 40°C közötti környezeti hőmérsékleten.
- Tartsa távol vízforrásoktól, tűztől és korrozív környezettől, hogy ne károsodjon az akkumulátor.
- Ne próbálja meg saját maga megjavítani, szétszerelni vagy módosítani a masszázspisztolyt.
- Ne használja a masszázspisztolyt töltés közben.
- Amikor teljesen feltöltődött, időben válassza le az áramforrásról.
- Ha hosszabb ideig nem használta, töltse fel használat előtt.
- A masszázsfej részben szilikonból készült. Szilikonallergia esetén ne használja a kerek vagy az U-alakú fejet, inkább a lapos fejet ajánljuk.

Csoportok, akik számára nem ajánlott a masszázspisztoly használata:

A kiskorúak és a 80 év feletti személyek számára tilos a masszázspisztoly használata a balesetek elkerülése érdekében. Amennyiben az alábbi feltételek valamelyike fennáll, használat előtt konzultáljon orvosával, és csak felügyelet mellett alkalmazza:


- Terhes vagy nemrég szült nők.
- 60 éves és idősebb személyek.
- Rhabdomyolysisben szenvedők.
- Végtaghiányos vagy paraplégias betegek.
- Szívritmus-szabályozóval vagy szenttel élő személyek.
- Akik az elmúlt 12 hónapban műtéten estek át.
- Akik rendellenes gerinc-, izületi vagy csontelváltozással rendelkeznek, illetve ortopédiai betegségeik vannak (pl. csonttrikulás, nyaki spondylosis, porckorongsérv).
- Akiknek a végtagérzékése vagy mozgása betegség vagy életkor miatt károsodott.
- Akik bármilyen betegséghez kapcsolódó szövődményben szenvednek (pl. neuropátia vagy retina károsodás).

Hiba vagy meghibásodás esetén:

- Kerülje a masszázspisztoly leejtését, rázását vagy ütését. Erős behatás károsíthatja az alkatrészeket vagy rendellenes működést okozhat. Ha ilyen történik, időben forduljon az ügyfélszolgálathoz.
- A masszázspisztoly hosszú ideig tartó folyamatos használata növelheti a felületi hőmérsékletét, ami károsíthatja azt. Ne használja túl hosszú ideig egyhuzamban.
- Ha a masszázspisztoly túlmelegszik, füstöt bocsát ki vagy szokatlan zúgó hangot ad, azonnal hagyja abba a használatát, és lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.
- Ha a masszázspisztoly túlmelegszik, deformálódik, duzzad vagy az akkumulátor szivárog, azonnal hagyja abba a használatát, és forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Termékáttekintés

Masszázsasztoly

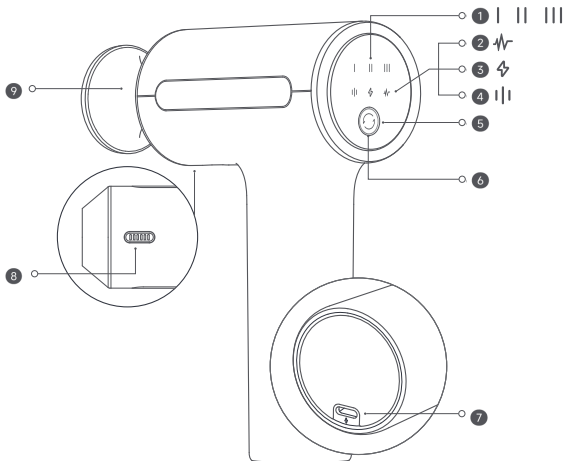


- | | |
|---|--------------------------|
| 1 Szint/Akkumulátor töltöttségjelző | 6 Nyomásérzékelő jelző |
| 2 Intelligens sebességű masszázsmód jelző | 7 Töltőport |
| 3 Töltésjelző | 8 Hűtőnyílás |
| 4 Rögzített sebességű edzés mód jelző | 9 Masszázsfej csatlakozó |
| 5 Funkciógomb | |


Masszázsasztoly használata:

- Enyhíti a késleltetett izomlázat edzés után, és ellazítja a feszes izmokat.
- Csökkenti a hát- és vállfájdalmat vagy merevséget, amelyet a hosszan tartó ülés és a rossz testtartás okoz.
- Segít az izmok ellazításában a mindennapi masszázs révén.


Terméktartozékok listája

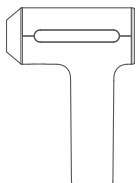


Masszázs pisztoly

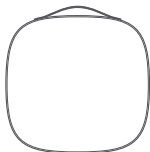

Tárolótáska

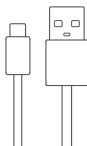


Töltőkábel

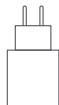

Tápadapter



Kerek fej

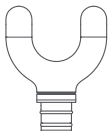

U-alakú fej



Lapos fej



Használati útmutató



Jótállás


- Kerek fej: Alkalmos nagyobb izomcsoportok masszírozására, például vállak, derék, karok, csípő, combok és vádlik.
- U-alakú fej: Alkalmos a hát, a gerinc két oldala és a vádlik masszírozására
- Lapos fej: Alkalmos az összes izom ellazítására.

Megjegyzés:

A használati útmutatóban található termék-, tartozék- és felhasználói felület illusztrációk csak referenciaként szolgálnak. A tényleges termék és funkciók a termék fejlesztése miatt eltérhetnek.

A masszázsfaj felszerelése és eltávolítása

Masszázsfaj felszerelése:

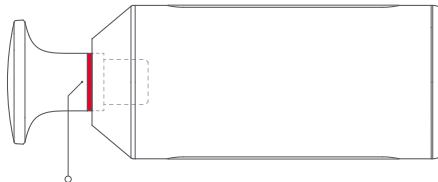

Telepítési vázlatvonal

- Válassza ki a megfelelő masszázsfaját az elérni kívánt masszázstípushoz.
- A masszázsfaj felszereléséhez erőteljesen nyomja be annak alapját a masszázspisztoly nyílásába.
- Győződjön meg arról, hogy a masszázsfajon lévő vonal egy síkban van a nyílással.

Megjegyzés:

Az ábrán piros vonallal jelölt rész a telepítés szemléltetésére szolgál, míg a tényleges terméken egy fényes felület jelzi ezt a vonalat.

Masszázsfaj eltávolítása


- Fogja meg a masszázsfaját, majd óvatosan húzza kifelé.
- Enyhén forgatva húzza ki a masszázspisztolyból.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- A masszázsfaját mindig kikapcsolt állapotban szerelje fel vagy távolítsa el.
- Ügyeljen arra, hogy a masszázsfaj megfelelően legyen rögzítve, mielőtt bekapcsolja a készüléket.
- Ne állítsa be, ne szerelje fel vagy távolítsa el a masszázsfaját a készülék működése közben, mert becsípődést okozhat.
- Ez a készülék nem használható csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) által, kivéve, ha egy felelős személy felügyeletet biztosít számukra.
- A gyermekeket felügyelet alatt kell tartani, hogy ne játszhassanak a készülékkel.
- A készülék nem cserélhető akkumulátorokat tartalmaz, és az akkumulátorcserét csak szakképzett személy végezheti el.

Használati útmutató

Töltés

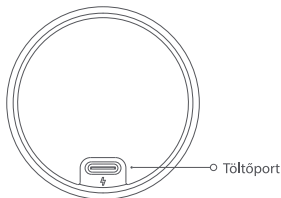


Csatlakoztassa a töltőkábel végét a töltőportba, majd csatlakoztassa a tápegységet a hálózati áramforráshoz.


Megjegyzés:

Töltés közben a masszázsgép automatikusan kikapcsol, és ebben az időszakban nem lehet bekapcsolni. Kérjük, használja a mellékelt tápegységet a töltéshez.

Akkumulátor szintjelző állapotának leírása:

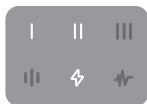

Töltés

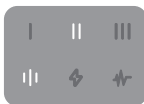

Használat közben



Alacsony akkumulátor szint

- **Töltés:** Az akkumulátor töltöttségi szintjelzői fehér fényel villognak, „lélegző” módon, és a valós idejű töltöttségi aránynak megfelelően balról jobbra fokozatosan világítanak.
- **Teljesen feltöltve:** A három töltöttségi szintjelző egyszerre villog 20 másodpercig, majd kikapcsol. Kérjük, időben húzza ki a masszázspisztolyt az áramforrásból.

A készülék automatikusan kikapcsol 20 perccel a teljes feltöltés után.

A termék energiafogyasztása teljesen feltöltött állapotban (230 V, 50 Hz) 0,16 W

- **Használat közben:** Az aktuális szintnek megfelelő jelzőfény fehéren világít.
- **Alacsony akkumulátorszint:** Az aktuális szintnek megfelelő jelzőfény pirosan villog. Kérjük, időben töltse fel a masszázspisztolyt.

Használati útmutató

Bekapcsolás: Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig. A szint- és módjelzők világítanak, jelezve, hogy a masszázspisztoly bekapcsol.

Kikapcsolás: Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig. A masszázspisztoly leáll, és a szintjelző kialszik, jelezve, hogy a készülék kikapcsol.

Automatikus kikapcsolás: A masszázspisztoly alapértelmezés szerint automatikusan kikapcsol 10 perc folyamatos működés után.

Szint beállítása: Bekapcsolt állapotban nyomja meg a bekapcsológombot a szintek váltásához (1. szint, 2. szint, 3. szint). A szintjelzők balról jobbra megfelelnek az egyes szinteknek.

Módváltás: Bekapcsolt állapotban nyomja meg a funkciógombot a fix sebességű mód és az intelligens sebességű módközötti váltáshoz. A megfelelő módjelző fehéren világít.

Újraindítás blokkolás és leállítás után: Ha a készülékre túlzott nyomás nehezedik, a blokkolás elleni védelemaktiválódik, és a masszázspisztoly leáll.

Ha 15 másodpercen belül megnyomja a bekapcsológombot, a készülék újraindul.

Ha a leállítás 15 másodpercnél tovább tart, nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig a bekapcsoláshoz.


Szintmemória: Ha blokkolás vagy kikapcsolás történik, a rendszer automatikusan megjegyzi az aktuális módot és szintet.

A következő bekapcsoláskor ugyanaz a mód és szint lesz érvényben, mint a kikapcsolás előtt.

A rendszer külön-külön tárolja a fix sebességű és az intelligens sebességű módok beállításait.


Módváltás esetén az aktuális szint is megfelelően módosulhat.

A módok ismertetése

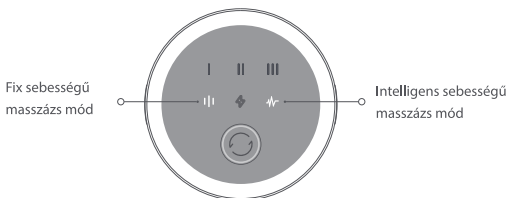

- **Fix sebességű masszázsmód:** A masszázs egy fix sebességgel történik, hogy hatékonyan pihentesse a fasciákat és gyorsan helyreállítsa az izmok vitalitását. Kiválóan alkalmas izomláz és fáradtság enyhítésére edzés után.
- **Intelligens sebességű masszázsmód:** A masszázs változó sebességgel történik, hogy az izomfeszültséget a masszázs ritmusának változtatásával enyhítse. Ideális napi pihenéshez és a fáradtság regenerálásához.

Nyomásintenzitás jelzőgyűrű állapotának leírása:

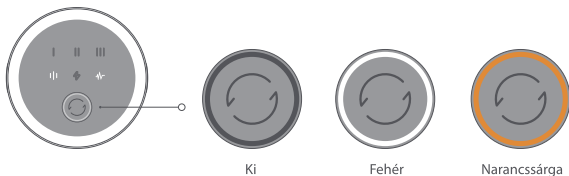

- **Ki:** Ha a jelzőgyűrű kikapcsol, az azt jelenti, hogy az intenzitás alacsony, és a masszázspisztoly enyhe masszázs módban működik. Az intenzitás a személyes preferenciák szerint beállítható.
- **Fehér:** Ha a jelzőgyűrű fehér színben világít, az azt jelenti, hogy a masszázs intenzitása közepes, és a masszázspisztoly normál masszázs módban van. Az intenzitás a személyes preferenciák szerint beállítható.
- **Narancssárga:** Ha a jelzőgyűrű narancssárga színben világít, az azt jelzi, hogy a masszázs intenzitása magas. Ilyenkor ajánlott csökkenteni az intenzitást a sérülések elkerülése érdekében.

A masszázspisztoly használata:

Finoman helyezd a masszázsfjezt arra a területre, amelyet szeretnél ellazítani, és lassan mozgathatod előre-hátra. Ha a terület erőteljesebb fájdalmat érzékel, kissé növelheted a nyomás intenzitását, és tartsd rajta 15-30 másodpercig.

Megjegyzések:

- Ajánlott a masszázspisztolyt alacsony szinten használni.
- Olyan területeken alkalmazd, ahol elegendő izomfedettség van.
- Ne maradj ugyanazon a területen 1 percnél tovább.
- Ne alkalmazd túlzott nyomást, hogy elkerüld a sérüléseket.
- Az ajánlott használati idő 10 perc. Ha még mindig feszességet és fájdalmat érzel, megfelelően meghosszabbíthatod a masszázst. Ne használj folyamatosan 30 percnél tovább.

Tisztítás és karbantartás

Tisztítás

Rendszeresen töröld le a masszázspisztolyt és a masszázsfejeket egy tiszta, enyhén nedves puha ruhával vagy nedves törölkendővel, majd szárítsd meg őket száraz ruhával vagy papírtörölkővel, mielőtt visszahelyezed őket a tároló tasakba vagy csomagolódobozba.

Figyelmeztetések

- Ne öblítsd vízben, és ne tedd ki közvetlen napfénynek a masszázsfejeket.
- Tisztítás előtt győződj meg róla, hogy a masszázspisztoly ki van kapcsolva, és nincs áram alatt.
- Ne használj maró hatású folyadékokat a masszázspisztoly tisztításához, mivel azok károsíthatják vagy megrepeszthetik a masszázspisztolyt, vagy megváltoztathatják annak színét.

Tárolási óvintézkedések

- Tárold a masszázspisztolyt hűvös, száraz helyen.
- Ne tárold a masszázspisztolyt 40°C feletti vagy -5°C alatti hőmérsékleten. Tartsd távol nedvességtől, vízforrástól, tüztől vagy korrózív környezetektől, hogy ne befolyásolja az akkumulátor teljesítményét.
- A masszázspisztolyt tárolásra vagy utazásra helyezheted a tároló tasakba.
- Ne üsd, szorítsd, dobd el, vagy karcold meg a masszázspisztolyt.
- A masszázspisztoly szállítható autóban, vonaton, hajón és repülőgépen. Biztosítsd a helyét.
- Ha a masszázspisztolyt hosszabb ideig nem használtad, töltsd fel használat előtt.
- Ha a masszázspisztoly túlmelegszik, deformálódik, megduzzad, vagy az akkumulátor szivárog a tárolás alatt, azonnal hagyj abba a használatát, és vedd fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

Műszaki adatok

Név: Xiaomi Masszázspisztoly 2

Nettó súly: Kb. 815 g

Modell: XMFG-M451

Töltőport: Type-C

Méret: 145 × 64 × 200 mm

Névleges bemenet: 5 V = 2 A

Akkumulátor típusa: Lítium-ion akkumulátor

Akkumulátor kapacitás: 2450 mAh

Működési hőmérséklet: 5°C - 40°C

Hibaelhárítás

Hiba	Gyakori ok	Megoldás
A akkumulátor szintjelző nem világít töltés közben.	A tápegységadapter nincs megfelelően csatlakoztatva a töltőkábelhez.	Győződj meg róla, hogy a tápegységadapter és a töltőkábel megfelelően van csatlakoztatva.
	A töltésjelző normálisan kialszik, miután a masszázspisztoly teljesen fel van töltve.	A masszázspisztoly normálisan használható.
	Ha a probléma a fenti két lehetőség kizárása után is fennáll, forduljon a ügyfélszolgálathoz.	
Az akkumulátor lassan töltődik.	Az akkumulátor hőmérséklete túl magas vagy túl alacsony.	Várjon, amíg az akkumulátor hőmérséklete visszatér a normál értékre, majd folytassa a használatot.
	A tápegység adapterének feszültség- vagy áramkimenete túl alacsony.	Kérjük, használja a mellékelt tápegység adaptert a töltéshez.
A masszázspisztoly nem működik.	A masszázspisztoly lemerült vagy alacsony az akkumulátor szintje.	Töltse fel a masszázspisztolyt használat előtt.
	A masszázspisztoly leállt és nem működik túlzott nyomás miatt.	Indítsa újra a masszázspisztolyt.
	Ha a probléma a fenti két lehetőség kizárása után is fennáll, forduljon a ügyfélszolgálathoz.	
A nyomásintenzitás jelzőgyűrű nem világít.	Alacsony töltöttségi szint.	Töltse fel a masszázspisztolyt használat előtt.
	A masszázspisztoly nem kapcsol be	Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 1,5 másodpercig a masszázspisztoly bekapcsolásához.
A motor rendellenes zajokat ad.	Idegen tárgy került a motorba.	Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
	A motor hibát észlelte.	
A masszázspisztoly hőmérséklete túl magas.	A használati idő túl hosszú.	Várjon, amíg a masszázspisztoly hőmérséklete visszaáll a normális szintre, mielőtt újra használatba veszi. Az ajánlott egyetlen használati idő nem haladhatja meg a 15 percet, és a folyamatos használat időtartama nem haladhatja meg a 30 percet.
	Motorhiba történt.	Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

EU Megfelelőségi Nyilatkozat



Mi, a Xiaomi Communications Co., Ltd. ezúton kijelentjük, hogy ez a készülék megfelel az alkalmazandó irányelveknek és európai normáknak, valamint azok módosításainak. Az EU megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetes címen érhető el:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

WEEE Információ



Minden olyan termék, amely viseli ezt a szimbólumot, elektromos és elektronikus hulladék (WEEE, 2012/19/EU irányelv) és nem szabad összekeverni a rendezetlen háztartási hulladékkal. Ehelyett a közegészség és a környezet védelme érdekében a használt készülékeket a kormány vagy helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőpontra kell leadni az elektromos és elektronikai hulladékok újrahasznosítására. A helyes ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít elkerülni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciálisan káros hatásokat. További információkért a gyűjtőpontok elhelyezkedéséről, valamint az újrahasznosítás feltételeiről kérjük, forduljon a kereskedőhöz vagy a helyi hatóságokhoz.

Gyártó: Xiaomi Communications Co., Ltd. Cím: #019, 9. emelet, 6. épület, 33 Xi'erqi Középútra, Haidian Kerület, Peking, 100085, Kína

További információért kérjük, látogasson el a www.mi.com weboldalra.

Kínában készült

Felhasználói kézikönyv verzió: V1.0



A726-050200U-EU2

A töltéshez használja az eredeti A726-050200U-EU2 hálózati adaptert.

EU képviselőt

Xiaomi Technology Netherlands B.V.

Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands

contact@support.mi.com

UK képviselőt

Xiaomi Technology UK Limited

Davidson House, Forbury Square, Reading, Berkshire RG1 3EU

contact@support.mi.com



60073