



SKG W7 Pro Derékmasszírozó

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy a SKG terméket választotta!

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- Ne használja a készüléket a következő egészségügyi készülékekkel együtt:
 - Beültetett szívritmus-szabályzó vagy egyéb beültethető egészségügyi elektronikai eszköz.
 - Mesterséges szív vagy tüdő vagy egyéb élet-fenntartó egészségügyi elektronikai eszköz.
 - EKG és egyéb egészségügyi elektronikai eszköz.
 - Benzinkutak, magas portartalmú üzemek, gáz és egyéb gyúlékony, robbanásveszélyes területen.
- Ne használja a készüléket vezetés, hegymászás vagy egyéb veszélyes tevékenység közben, mert balesetet okozhat.
- Ha a felhasználó magas frekvenciájú sebészeti eszközt és a készüléket egyszerre használja, a testén az elektródák helyén égési nyomok keletkezhetnek és egyéb károkat okozhatnak a készülékben.
- Ha a készüléket rövidhullámú mikrohullámú terápiás eszköz közelében (1m) használja, a termék kimenete instabil lehet.
- A kezelés alatt kerülje, hogy az elektródák sebekkel és sérülésekkel érintkezzenek.
- A készülék használata során figyeljen rá, hogy a mellkason ne helyezze a szív közelébe.
- A készülék használata csak egy személy részére javasolt. Ha több személy használja, tisztítsa meg az elektródákat új személy általi használat előtt.
- Ha más személyre helyezi át a készüléket vagy arrébb helyezi az elektródákat masszázs közben, ellenőrizze, hogy a tápcsatlakozást eltávolította, különben elektromos áramütés érheti.
- Használat során az elektródák szorosan érintkezzenek a bőrfelülettel a megfelelő hatékonysághoz.
- Ne használja a melegítő funkciót hosszú időn át (több, mint 20 perc), mert alacsony hőmérsékletű égést okozhat.
- Ha a használat során vagy után kellemetlenül érzi magát, hagyja abba a termék használatát és forduljon egészségügyi szakemberhez.
- Az alábbi esetekben forduljon orvosához a termék használatba vétele előtt, különben balesetet vagy fizikai kényelmetlenséget okozhat:
 - Egészségügyi kezelés alatt álló és kényelmetlen érzéssel rendelkező páciens
 - Rozsdamentes acél elektródákra allergiás betegek
 - Rendellenes szív és idegrendszerrel rendelkező páciens
 - 38 fokos testhőmérséklet felett (láz esetén)
 - Fertőző betegség esetén
 - Bőrérzékenység vagy egyéb bőr rendellenesség esetén
 - Gyógyszeres kezelés alatt álló páciens
 - Rendellenes vérnyomás esetén
 - Korlátozott cselekvő képesség esetén
 - A magas perifériás keringési rendellenességek, például cukorbetegség miatt érzékszervi károsodásban szenvedő betegek.
- Az alábbi esetekben ne használja a készüléket:
 - Rosszindulatú daganat esetén
 - Vérzékenység esetén
 - Véralvadási rendellenesség esetén

- Állapotos nők
- Akut váladékkal járó gyulladós megbetegedés esetén
- Szívritmus-szabályzóval rendelkező betegek esetén
- Görcsös bénulás esetén
- Fél órán belül étkezés után.
- Rendellenes idegrendszeri stressz esetén
- Cerebrovaszkuláris balesetet követő görcsös fázisban lévő egyének
- Tisztázatlan tudatállapotú egyének, valamint végtag- és ízületi kontraktúras deformitások.
- A készüléket ne használja a derék alatt vagy a has alsó részén a terhesség kezdeti szakaszában.
- Fém implantátummal rendelkezők esetén
- Súlyos kognitív károsodás esetén
- Szív közelében
- A szemén
- Keringési rendellenességek, pl agyi érbetegségek, gyulladt vagy duzzadt bőr a nyakon, gennyesedés nyakkal kapcsolatos rendellenességek esetén, mert súlyosbíthatja az állapotot.
- 70 év feletti nem használhatják a készüléket. 65 év feletti alacsonyabb fokozaton használják csak a készüléket és figyeljenek a használati időtartamra, mert a bőrük kényesebb és az idegvégződéseik érzéketlenebbek lehetnek.
- Fokozatosan emelje a masszázis erősségét a személyi komfortérzetnek megfelelően, mert a túl erős fokozattól izomláz okozta kellemetlen érzése támadhat.
- Ne használja a szív közelében, a nyak felett, fejen, szájon, genitáliákon, bőr rendellenességen, valamint a talpakon egyszerre. Továbbá ne nyomja a belső szerveket a használat során.
- Ne használja zsigeri szervek nyomására. Nem megfelelő használat balesetet és fizikai kényelmetlenséget okozhat.
- Ne használja együtt más egészségügyi termékkel vagy két terméknel többet egy időben.
- Ne használja sérült vagy repedezett felületen.
- Ne helyezze az elektródákat a koponyacsont közelébe, ha a beteg korábban agyi érrendszeri balesetet szenvedett.
- A készülék hőtermelő felülettel rendelkezik. Hőre érzékenyek óvatosan használják.
- A készülék megfelel az FCC szabályzat 15. pontjának. Nem okoz sérülést okozó interferenciát. Ennek a készüléknek el kell fogadnia a kapott interferenciát, beleértve azokat az interferenciákat, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.
- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- Kérjük, ne tegye ki a készüléket erős elektromágnesességnek, ill. rádióhullámoknak. Ezek a készülék meghibásodását okozhatják.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek (0°C alatt és 35°C felett), valamint tűző napsugárzásnak.
- A készüléket és a tartozékait tárolja -20°C és +45°C közötti hőmérsékleten.
- Amennyiben a készülék elektromos hálózatra történő csatlakoztatása után azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a tűzesetek megelőzése érdekében!
- Tűz-, és balesetveszély elkerülése érdekében ellenőrizze használat előtt, hogy az akkumulátor és a töltő nem sérült-e. Ne használja a készüléket ha a töltő vagy az akkumulátor sérült.
- A készülék nem játék! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
- A készüléket hűvös, száraz helyen tárolja.
- Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati kábelt.
- Védje a hálózati kábelt. Vezesse úgy, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.

- Húzza ki a kábelt a fali aljzatból, amennyiben huzamosabb ideig nem szándékozik használni a készüléket.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét, a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülékben.
- Huzamosabb használat esetén, vagy folyamatos terhelés mellett a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre.
- Ne helyezzen tárgyakat a készülék nyílásaiba, ne használja a készüléket bármelyik nyílás eltömődése esetén. Tartsa por, szősz, haj és egyéb tárgyaktól távol, amelyek akadályozhatják a légáramlást.
- Ezt a terméket gyermekek, szellemileg-, vagy fizikailag korlátozott személy nem használhatja. A készülék karbantartását és tisztítását gyermekek nem végezhetik.
- Ne nyúljon a mozgó alkatrészekhez, és tartsa távol a haját és a ruházatát is tőlük.
- A tisztítás vagy karbantartás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket és távolítsa el a tápkábelt a konnektorból.
- Ne vágja szét, ne javítsa és ne módosítsa a készüléket vagy a tartozékokat.
- Ne érintse meg a töltőt vagy a készülék bármely részét nedves kézzel.
- A készüléket mindig tartsa távol a hőforrásoktól (pl. radiátor, fűtőtest).
- Megfelelően kezelje az akkumulátort – veszélyes hulladéknak számít!
- Ha az akkumulátor nincs használatban, tartsa távol fém tárgyaktól, pl irattartó kapocs, pénzérme, kulcs, szögek vagy csavarok. Az akkumulátor érintkezőinek összezárása tűz és égés kockázatát rejti.
- Amennyiben a tápkábel, az adapter vagy az akkumulátor megsérül, feltétlenül ki kell azt cserélni. Ne üzemeltesse így a készüléket.
- Sérülékeny feltételek esetén folyadék szivároghat az akkumulátorból. Kerülje az érintkezést, mert bőrirritációt okozhat. Ha ez előfordul, öblítse le vízzel a bőrét. Ha a folyadék szembe kerül, kérjen orvosi segítséget.
- Szállítás előtt ellenőrizze, hogy ki van-e kapcsolva a készülék. Javasoljuk az eredeti csomagolás megtartását.
- Amennyiben huzamosabb ideig nem használja a készüléket, javasoljuk, hogy legalább 90 naponként töltsen fel teljesen az akkumulátort.
- NE dobja az akkumulátort vagy a készüléket és tartozékokat tűzbe, mert robbanásveszélyes.
- NE merítse vagy dobja az akkumulátort vagy a készüléket és tartozékokat bármilyen vízbe, sós vízbe vagy folyadékba.

Megjegyzések:

- Ha kényelmetlenséget vagy rendellenességet tapasztal a termék használata során, hagyja abba a termék használatát azonnal!
- Ha a testén vagy bőrén furcsa érzést tapasztal, konzultáljon orvosával és kövesse az orvos utasításait.
- Ha készüléket használat közben más személyre helyezi, ellenőrizze, hogy az áthelyezés előtt a készüléket kikapcsolta.
- Ne használja elektronikai eszközök viselése közben.
- Ha rendellenes működést tapasztal, kapcsolja ki a készüléket és vegye le.
- Ne csatlakoztassa vagy húzza ki az USB kábelt nedves kézzel.
- Ne használja magas páratartalmú helységben (pl. fürdőszoba) vagy fürdés közben.
- Ne tárolja a készüléket -20°C alatti és 45°C feletti feletti helységben.
- Ne használja alvás közben vagy öntudatlan állapotú személyen.

- Melegre érzékenyek használják alacsony fokozaton és szigorúan figyeljenek oda a használati időtartamra.
- Ne használja hosszú ideig egy területen (több, mint 30 percig).
- Masszázs közben ne érintkezzenek az elektródák övek, nyakláncok, stb. fém felületeivel.
- Viselje megfelelően a készüléket a nyaki gerincen.
- Az USB kábel eltávolításakor ne csak a kábelt húzza, hanem a csatlakozó végénél fogja meg a kábelt.
- Hosszabb idejű használat esetén a felület felmelegedhet. Ez normális jelenség.
- Ellenőrizze, hogy a gomb megfelelően működik.
- Első használat előtt, vagy hosszabb használaton kívüli időszak után, töltsse fel az akkumulátort.
- Ha nem használja tovább a terméket figyeljen oda a helyi hulladék-kezelési szabályok betartására.
- A készülék egy személyi masszázstermék és nem helyettesít gyógyszereket vagy egészségügyi eszközöket.
- Ne használja a nyakon kívül más testrészen.
- Használata 16 éves kor felett javasolt.

Ne tárolja vagy használja a készüléket az alábbi körülmények esetén:

- Közvetlen napfény
- Erős elektromágneses sugárzás
- Forró és párás helyen
- Vibrálásra és rázásra érzékeny helyeken
- Víz közelében
- Tűz közelében
- Nagy portartalmú helységben

JELLEMZŐK

Modell:	W7 Pro
Teljesítmény:	10W
Névleges feszültség:	5V
Akkumulátor:	2000 mAh / 7,4 Wh

** Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a környezet változása miatt a valóságban eltérhetnek.*

DOBOZ TARTALMA

- SKG W7 Pro derékmasszírozó
- USB kábel
- Használati útmutató
- Jótállási jegy

Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

Gyártó:

SKG Health Technologies Co., Ltd.

Address: 23A Floor, Building 3, Zhongke R&D Park, No. 009, Gaoxin South 1st Road, High-tech Zone Community, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen, China

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

A gyártó ezennel kijelenti, hogy a készülék megfelel minden direktívának és európai normának.

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.

© 2024 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.

IMPORTŐR:

WayteQ 


WAYTEQ EUROPE KFT. | 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.

Tel.: (+36-1) 445-1222


Email: info@wayteq.eu | Web: wayteq.eu mstore.hu

KEZELŐSZERVEK


Előlnézet

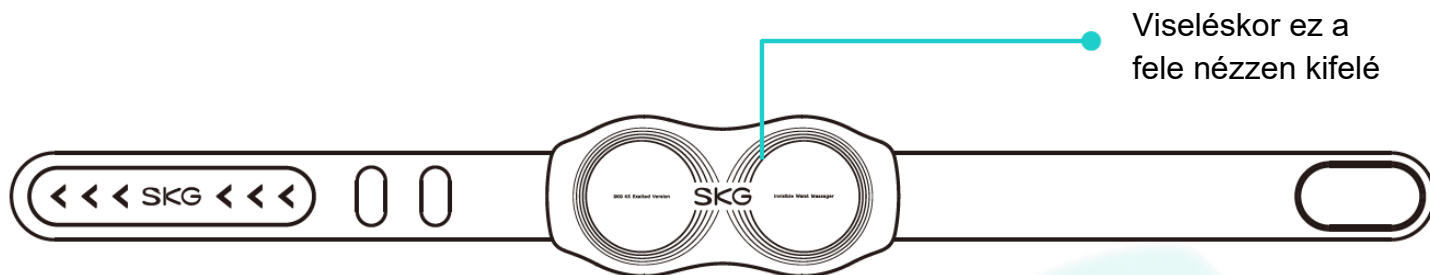

Hátul nézet

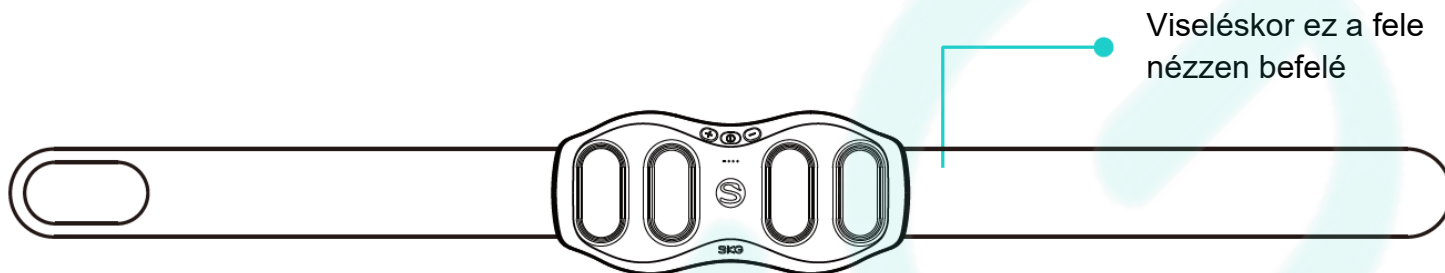


Masszírozó

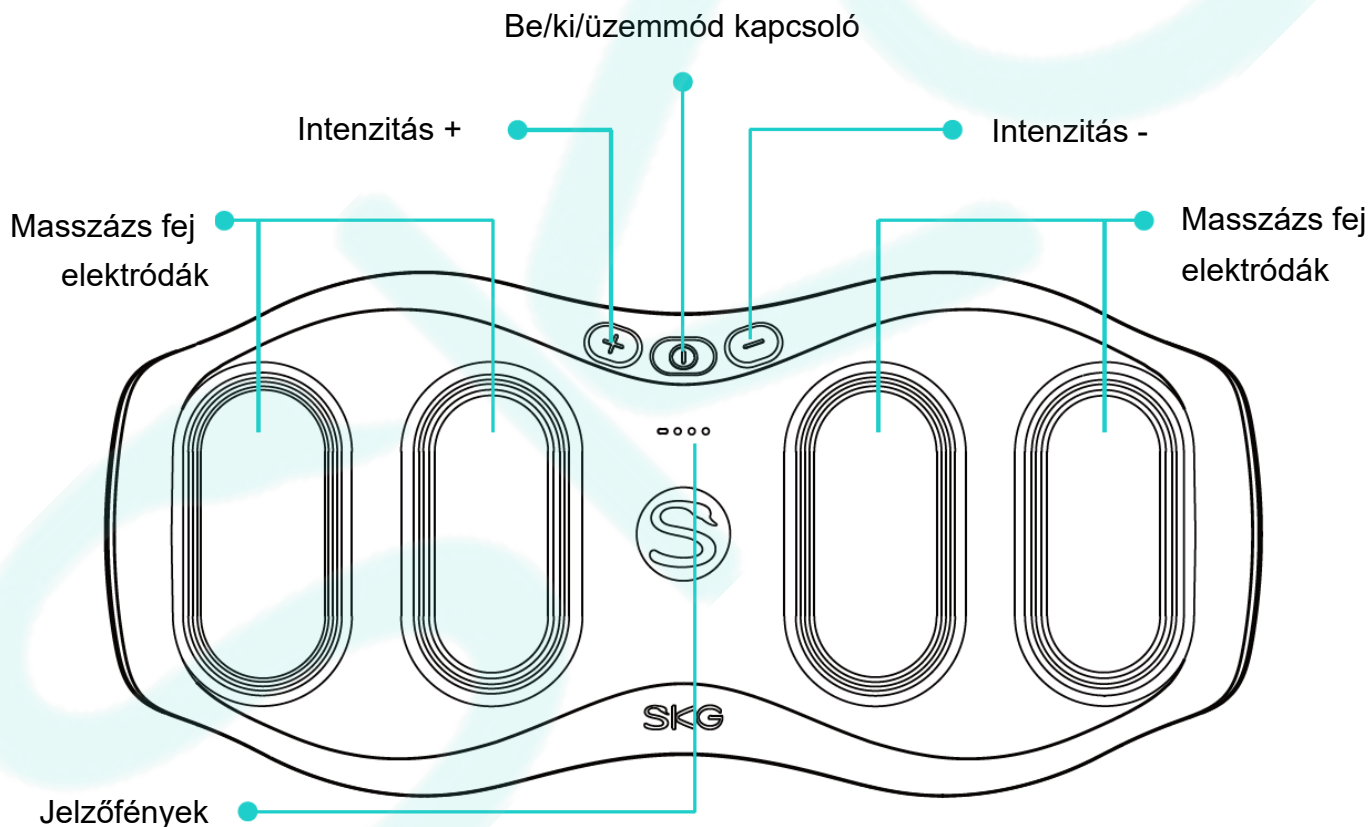

(Töltés energiaszint jelzők)

Teljes töltöttségnél mind a négy fény világít. A fehéren világító fények száma jelzi az akkumulátor energiaszintjét. Ha csak egy jelzőfény világít vörösen, az alacsony energiaszintet jelent. Töltsd fel az akkumulátort.

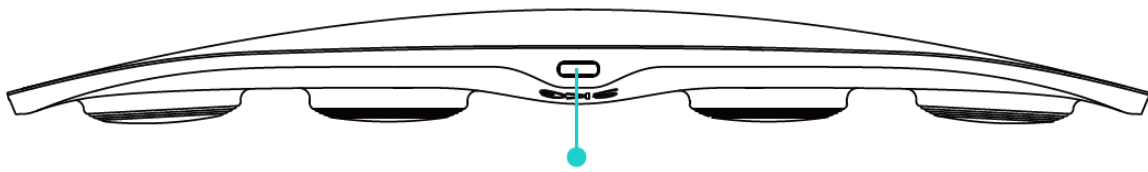

Töltő csatlakozó

HASZNÁLAT

1. A csomagolás kinyitása után töltsse le a „Future Wear” alkalmazást (az okos funkciók beállításához). Ha vásárolt távvezérlőt, akkor használja az öv vezérléséhez. (A távvezérlő használatához nézze át a távvezérlő csomagolásában található használati utasítást.)

2. Tartsa nyomva a Be/kikapcsoló gombot 1,5 másodpercig a bekapcsoláshoz. Ha az elektródák felmelegedtek, helyezze a készüléket a derekára és szorítsa meg a szíjat. Így az elektródák szorosan érintkezni tudnak a bőrfelülettel (ha a bőre száraz, nedvesítse meg használat előtt.)

3. Indítsa el az alkalmazást a további beállításokhoz, pl intenzitás, üzemmód és melegítés vezérlés.

4. Vegye le az övet használat után.

Az alábbi irányban helyezze fel:



Töltés / energiaszint

Sorszám	Fényjelzés állapota	Leírás
1	Fehér fény világít	Akkumulátor energiaszint
2	Vörös fény világít	Energiaszint alacsony
3	Vörös fény villog	Energiaszint nagyon alacsony
4	Fehér fény ciklikusan világít	Akkumulátor töltés
5	Fehér fény világít	Akkumulátor feltöltve

FUTURE WEAR ALKALMAZÁS

1. Töltse le a „Future Wear” alkalmazást az alkalmazás boltból vagy olvassa be a QR kódot



A Google Play és a Google Play logo a Google Inc., bejegyzett védjegye.
Az Apple és az Apple logo az Apple Inc., bejegyzett védjegye.

2. Regisztráljon és lépjen be az alkalmazásba




3. Kapcsolja be a készüléket és a Bluetooth funkciót a mobiltelefonon,
majd adja hozzá az eszközt a „Future Wear” alkalmazáshoz.



TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS (CSAK ÖV)



Tartsa távol közvetlen napfénytől

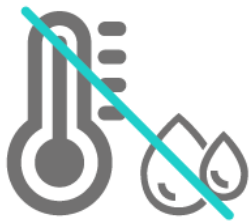

Tartsa távol magas hőmérsékletű és párás helytől



Tartsa távol nyílt lángtól és füsttől!



Tartsa távol magas portartalomtól



Mosógépben nem mosható




Kézzel mosható



Szárítógépben nem szárítható



Nem fehéříthető

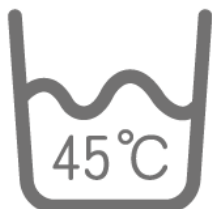

Maximum víz hőmérséklet 45°C



Szárítás jól szellőző helyen



Ne csavarja meg

Megjegyzés: Az öv mosható, de a masszírozó csak törölhető!

Ne használja vagy tárolja a készüléket az alábbi környezetben:

Ne tegye ki közvetlen napfénynek! Ne helyezze magas hőmérséklet és párás hely közelébe! Ne helyezze vizes környezetbe. Ne helyezze magas portartalmú környezetbe. Tartsa távol nyílt lángtól és füsttől! Ne helyezze rázásra és vibrálásra érzékeny helyre. Ne helyezze erős elektromágneses környezetbe.



Tartsa távol kemény tárgyaktól, kerülje az ütődést és karcosodást.

Hosszabb használaton kívüli időszak esetén havonta egyszer töltsse fel az akkumulátort.

HULLADÉK-KEZELÉS

Akkumulátor

Támogassa az akkumulátor újrahasznosítását (lithium-ion akkumulátor)

 <p>Veszély</p>	<p>A készülék újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ne használja más termékben. Ne töltsen fel a kiszereelt akkumulátort</p> <ul style="list-style-type: none">• Ne dobja tűzbe vagy melegítse fel.• Ne szúrja meg tűvel, üsse meg vagy próbálja meg szétszerelni.• Ne okozzon rövidzárlatot fém érintkezéssel.• Ne tárolja nyaklánc vagy hajtű mellett.• Ne töltsen, használja vagy helyezze tűz közelébe, ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy egyéb magas hőmérsékletnek. <p>A fentiek melegegését, tüzet vagy robbanást okozhatnak</p>
 <p>Figyelmeztetés</p>	<p>A kiszereelt akkumulátort gyermekek által nehezen elérhető helyen tárolja.</p> <ul style="list-style-type: none">• Véletlen lenyelés esetén forduljon azonnal orvoshoz!• Az akkumulátorból szivárgó folyadékot ne érintse meg és az alábbiak szerint kezelje:<ul style="list-style-type: none">○ Ha az akkumulátorból szivárgó folyadék szembe kerül, az vakságot okozhat. Ne érintse meg a szemét közvetlenül a kezével. Mossa meg a szemét vízzel és azonnal forduljon orvoshoz. Ha a folyadék bőrrel vagy ruhával érintkezik, irritációt és sérülést okozhat. Mossa meg vízzel és ha a kellemetlen érzés megmarad, azonnal forduljon orvoshoz.○ Csak selejtezés esetén bontsa meg az akkumulátort, melyet csak szakember végezhet! Ellenkező esetben sérülést, áramütést és tüzet okozhat. Javítási igény esetén forduljon szakszervizhez.

A készülékben használt lithium-ion akkumulátorok újrahasznosíthatóak és értékes erőforrások. Ha az akkumulátor elhasználódott adja át megfelelő szakértelemmel rendelkező szervezetnek újrahasznosításra.

- Az akkumulátort el kell távolítani a készülék hulladék-kezelése esetén.
- A készüléket áramtalanítani kell az akkumulátor eltávolítása előtt.
- Az akkumulátor eltávolításakor figyeljen a biztonsági előírásokra.