



xiaomi



# Mi Smart Scale 2

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Xiaomi Mi Smart Scale 2 Manual HU v1.0 - 1. oldal

*A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.*

*A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.*

## BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

## BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

### BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- A készülék csak beltéri használatra alkalmas, az optimális hőmérséklet kb. 25°C
- Ne használja a készüléket vizes lábbal vagy vizes felületen, mert az balesetveszélyes lehet.
- A leesés veszélyét elkerülendő soha ne álljon a mérleg szélére vagy peremére.
- Ne használja a készüléket vizes környezetben és ne merítse vízbe.
- Miután az elemek kimerültek, azonnal távolítsa el a készülékből, a korrózió és az elemek kifolyásának megelőzése érdekében.
- Pacemaker-rel vagy egyéb implantátummal rendelkezőknek a mérleg használata nem javasolt.
- A mért adatok változhatnak a terhesek, a sportolók és a speciális helyzetűek esetében is.
- A maximális mérhető tömeg és a készülék maximális teherbírása 150 kg.
- A mérleget csak sík felületre helyezze!
- A készülék csak otthoni használatra alkalmas.
- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző napsugárzásnak.
- Ne hagyja a készüléket kisgyermek számára elérhető helyen
- A készülék nem játék! Gyermek minden esetben kizárólag szülői felügyelet mellett használhatja! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
- A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.
- A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (0°C alatt és +40°C felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort.
- Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék alaplapjában.

### A mérleg tisztítása

- Az ujjlenyomatok és egyéb szennyeződés eltávolításához használjon puha, sima felületű ruhát, mint pl. kamera lencsetisztító kendő.
- Ne használjon kemikáliákat, vagy maró anyagokat tartalmazó tisztítószeret, mert károsíthatják a mérleg burkolatát.
- A készülék külső felületét nedves ruhával tisztíthatja meg.

## JELLEMZŐK

Modell:	XMTZC04HM
Méret:	280 x 280 x 22 mm
Tömeg:	1,2 kg.
Mérési tartomány:	100 g. ~ 150 kg.
Mértékegység:	Kg. / font
Mérési pontosság:	0,1 kg / font
Burkolat:	edzett üveg + ABS műanyag
Vezeték nélküli kapcsolat:	Bluetooth 4.0 vagy újabb
Áramellátás:	3 x AAA elem
Alkalmazás:	Zepp Life
Kompatibilitás:	Android 4.4+ / iOS 9.0+

\* Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a környezet változása miatt a valóságban eltérhetnek.

## A DOBOZ TARTALMA

- Mi Smart Scale 2 mérleg
- Használati útmutató

## Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

## Gyártó:

Anhui Huami Information Technology Co., Ltd.

Address: Room 1201, Building A4, National Animation Industry Base, No. 800 Wangjiang West Road, Gaoxin District, Heifei, Anhui, China

## Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

A gyártó kijelenti, hogy a termék megfelel a 2014/53/EU direktívában előírt követelményeknek. A gyártó által kibocsátott megfelelőségi nyilatkozat elérhető a [www.mi.com/en/certification](http://www.mi.com/en/certification) oldalon.


## Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BKM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.




## ELEMEK BEHELYEZÉSE

Nyissa ki a készülék hátulján található elemtartó fedelet, majd helyezzen be 3 db. AAA elemet az ábra szerint, majd zárja vissza az elemfedelet.

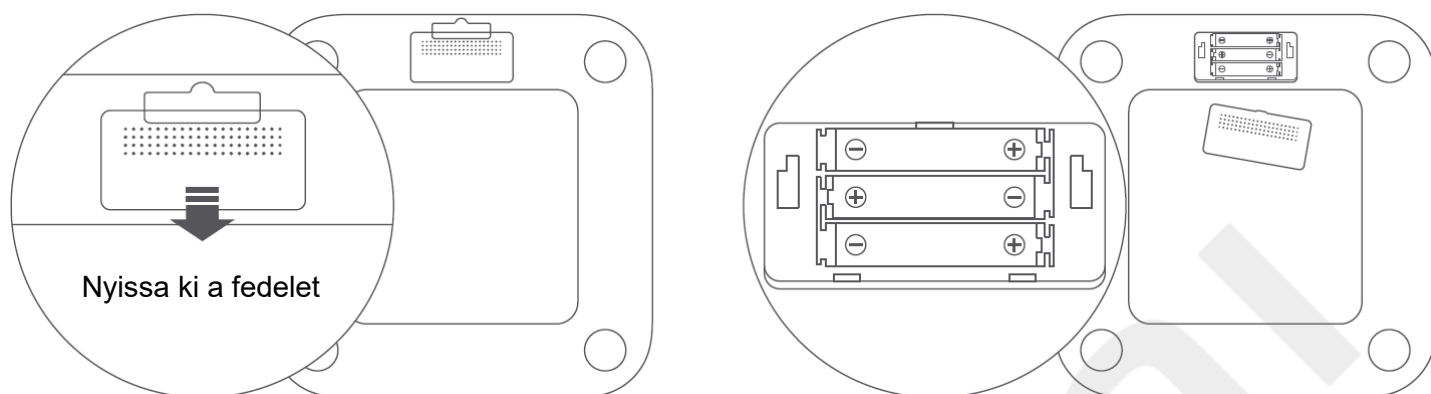

## A MOBIL ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE

Olvassa be a QR kódot és telepítse a „Zepp Life” (korábban Mi Fit) alkalmazás legújabb verzióját vagy keresse meg az alkalmazást a Google Play, illetve App Store alkalmazásáruházakban.

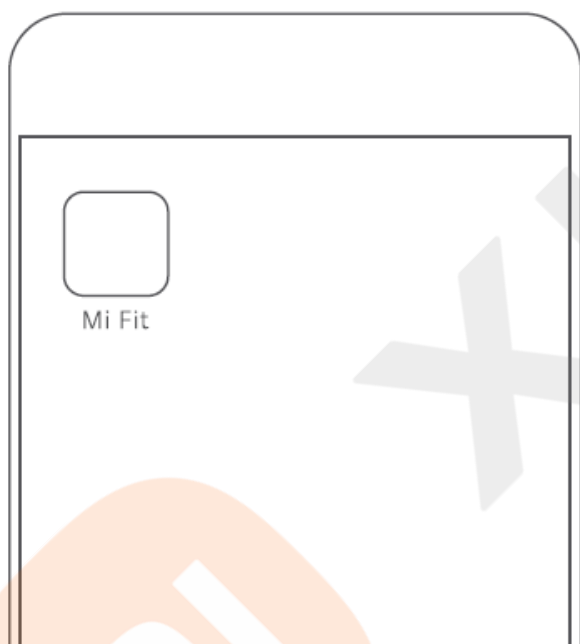

## CSATLAKOZÁS A MÉRLEGHEZ

Indítsa el a Zepp Life alkalmazást és lépjen be az Mi fiókjába, majd párosítsa a mérleget a fiókjával és adja meg az adatait a képernyőn megjelenő információk alapján. A párosítás után ellenőrizheti adatait a Zepp Life és Mi Home / Xiaomi Home alkalmazásban.

### Megjegyzés:

*Kérjük, figyeljen oda, hogy helyes adatokat adjon meg a Mi fiókjában.*

### Megjegyzés:

*A készülék tulajdonságai és műszaki jellemzői előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak folyamatos termékfejlesztésünk eredményeként vagy firmware frissítést követően.*

*A párosítás és a csatlakoztatás során tartsa minél közelebb a készüléket a telefonhoz.*

*Első csatlakoztatás után a mérleg firmware-e automatikusan frissülhet. Ez normális folyamat, és 5-15 percet is igénybe vehet. Kérjük, gondoskodjon róla, hogy ilyenkor legyen hozzáférhető, szélessávú (lehetőleg WiFi) internetkapcsolat a telefonon. Kérjük, legyen rá figyelemmel, hogy amennyiben Ön mobil internetet használ, ez a folyamat esetleg többletköltséget okozhat Önnek.*

## A MÉRLEG HASZNÁLATA

### Személyek mérése

Helyezze a mérleget egy kemény, sík felületre.

Figyeljen az elhelyezkedésre az ábra szerint. Lépjen rá a mérlegre és álljon két lábbal stabilan a mérleg közepén.

Ha a jelzett súly villog, a mérés befejeződött és a mérési analízis megnézhető az alkalmazásban.



*A mérési adatok csak tájékoztató jellegűek – NE kezelje azt megfelelően orvosi célokra!*


## Tárgyak mérése

Helyezze a mérleget egy kemény, sík felületre. Kapcsolja be a mérleget. Várja meg, amíg a kijelzőn megjelenik a „0.00” jelzés, majd helyezze a tárgyat a mérlegre. A mérleg mozgatása, meglökése befolyásolja a pontosságot, így ilyen esetben újra kell kezdeni a mérést.

## Figyelmeztető jelzések

Ha mérés során egy villogó „L” jelzés jelenik meg a kijelzőn az azt jelzi, hogy az elemek energiaszintje alacsony. Cserélje ki az elemeket mielőbb

Ha mérés során egy villogó „OL” jelzés jelenik meg a kijelzőn az azt jelenti, hogy a súly meghaladja a maximális mérhető, 150 kg súlyhatárt.

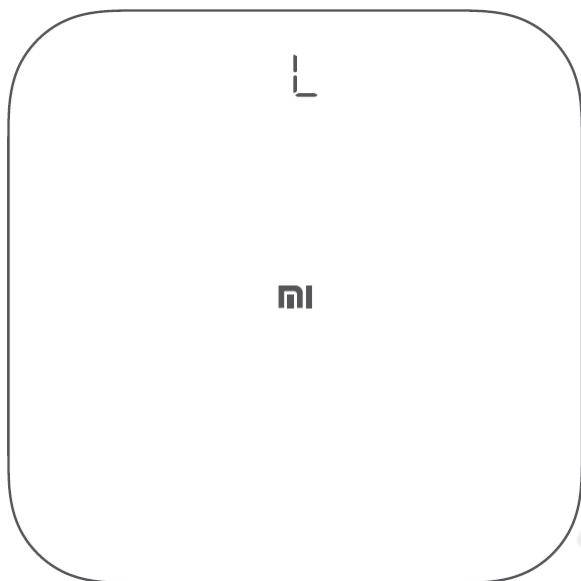

## Súly mértékegység kiválasztása

A mérleg alap beállítás szerint kilogrammban jelzi a súlyt. A mérési mértékegységet az alkalmazásban megváltoztathatja. A mérés megjelenhet kilogrammban (kg) és fontban (lbs).

© 2022 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.

**IMPORTŐR:**

**WayteQ**

WAYTEQ EUROPE KFT. | 1097 Budapest, Gubacsi út 6.

Tel.: (+36-1) 21-73-632, (+36 1) 21-73-631 | Fax: (+36-1) 21-73-619

Email: [info@wayteq.eu](mailto:info@wayteq.eu) | Web: [www.wayteq.eu](http://www.wayteq.eu) [www.mstore.hu](http://www.mstore.hu)